



CONFORT OPTIMAL ET PRÉCISION – **IDENTIUM®**

EMPREINTES DE PRÉCISION



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

IDENTIUM® – LA COMBINAISON DE 2 MATÉRIAUX D'EMPREINTES POUR UN RÉSULTAT PARFAIT!

Matériau d'empreintes de précision d'une génération spéciale

Allie dans un équilibre parfait les avantages de deux matériaux d'empreintes éprouvés (silicone A et polyéther) – Vinylsiloxanether®.




EMPREINTES EN UNE ÉTAPE

- Empreintes double mélange
- Empreintes monophasés



INDICATIONS

- Couronnes et bridges
- Inlays/onlays
- Empreintes fonctionnelles
- Implants
- Restaurations combinées (empreintes des fixations)
- Surempreintes

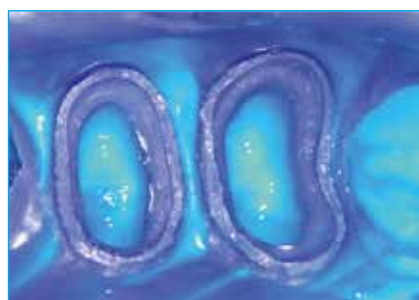

Empreintes double-mélange




Empreintes sur implants



IDENTIUM® – CONFORT ET PRÉCISION

Retrait très facile de la bouche

Force de traction **2,6 fois** inférieure **Identium®** vs Impregum™

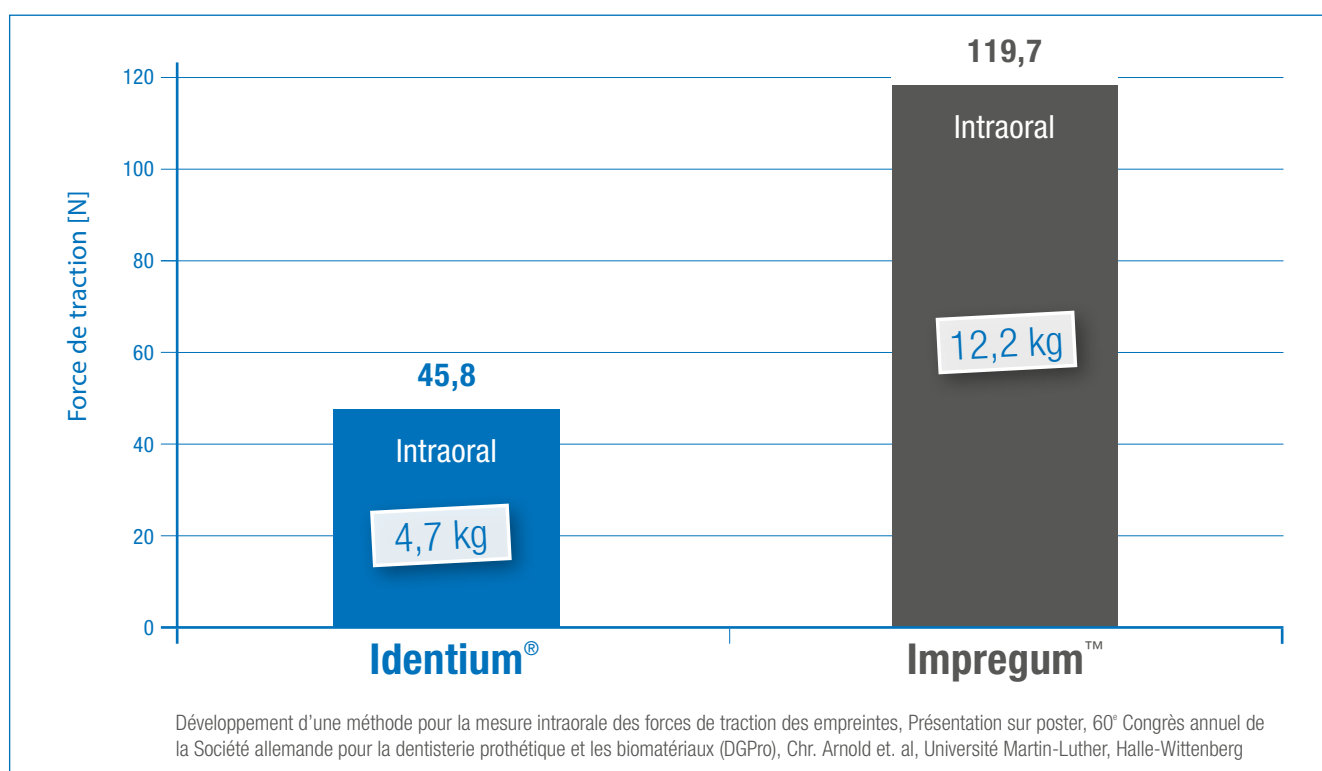

Le retrait de l'empreinte de la bouche du patient sans forcer vous évitera les extractions involontaires, les déformations et les irritations.


Encore plus précis



**Des avantages qui
sont appréciés par
vos patients.**

Prise rapide

avec une durée de préparation suffisante et une durée de prise en bouche plus courte

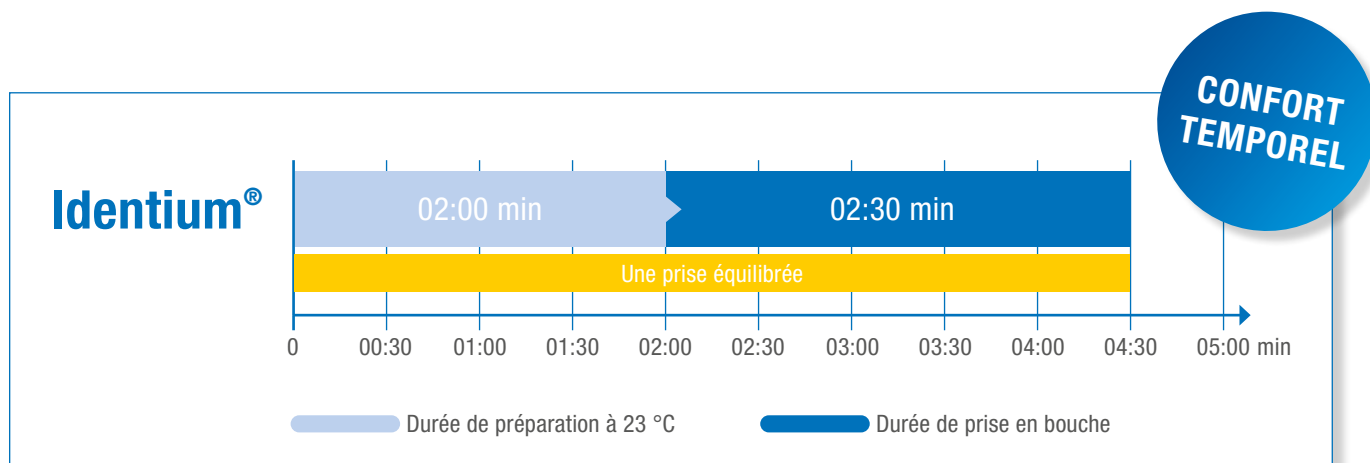

La durée de préparation suffisante vous permet de travailler sereinement.
Encore plus précis

Excellente fluidité



Grâce à l'excellente fluidité d'**Identium®** Light, vous reproduirez fidèlement tous les détails, même dans les espaces les plus étroits.
Encore plus précis



- **Matériau sans goût et sans odeur**, ce qui réduit le réflexe nauséux et laryngé
- **Prise rapide et retrait facile de la bouche** pour une sensation agréable et détendue
- **Initialement hydrophile** – bonne performance même en cas d'humidité résiduelle

PRISE D'EMPREINTES PRÉCISE ET CONFORTABLE



RETRAIT FACILE DE LA BOUCHE

COURTE DURÉE DE PRISE EN BOUCHE

INITIALEMENT HYDROPHILE

Disponible en viscosités
Heavy, Medium et Light



Le choix entre 2 temps de prise:
« **standard** » (4'30 min)
et « **rapide** » (3'30 min)



Compatible avec tous les
**mélangeurs automatiques
courants**



IDENTIUM® – LA GAMME



HEAVY		Identium® Heavy	Identium® Heavy Fast		
	Refill pack	REF 14725 2 cartouches de 380 ml	REF 14727 2 cartouches de 380 ml		
MEDIUM		Identium® Medium	Identium® Medium Fast		
	Refill pack	REF 14717 2 cartouches de 380 ml	REF 14719 2 cartouches de 380 ml		
LIGHT		Identium® Light	Identium® Light Fast		
	Normal pack	REF 13701 2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris	REF 13711 2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris		
ACCESSOIRES	Identium® Adhesive	Dynamic Mixers	Mixing tips	Sympress Dispenser	Applyfix 5
	REF 14204 Flacon de 10 ml	REF 17900 45 pièces blanches	REF 17226 / REF 17240 50 embouts mélangeurs gris / 100 embouts mélangeurs gris	REF 35910 appareil électrique de dosage et de mélange automatique	REF 17204 2 seringues d'application, 12 canules de rechange

Toutes les cartouches de 50 ml sont disponibles dans un système de cartouches modifié.



Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



032785_0525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent