




Nouveau système
de cartouche
NOUVEL ADHÉSIF



L'ADHÉRENCE AU TOOOOP MUCOPREN® SOFT

MATÉRIAU DE REBASAGE SOUPLE

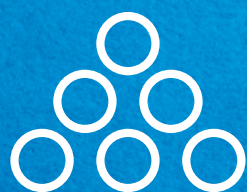


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Rebasage de prothèse

Mucopren® Soft est un matériau de rebasage souple et à long terme à base de silicone A **pour les utilisations directes ou indirectes.**

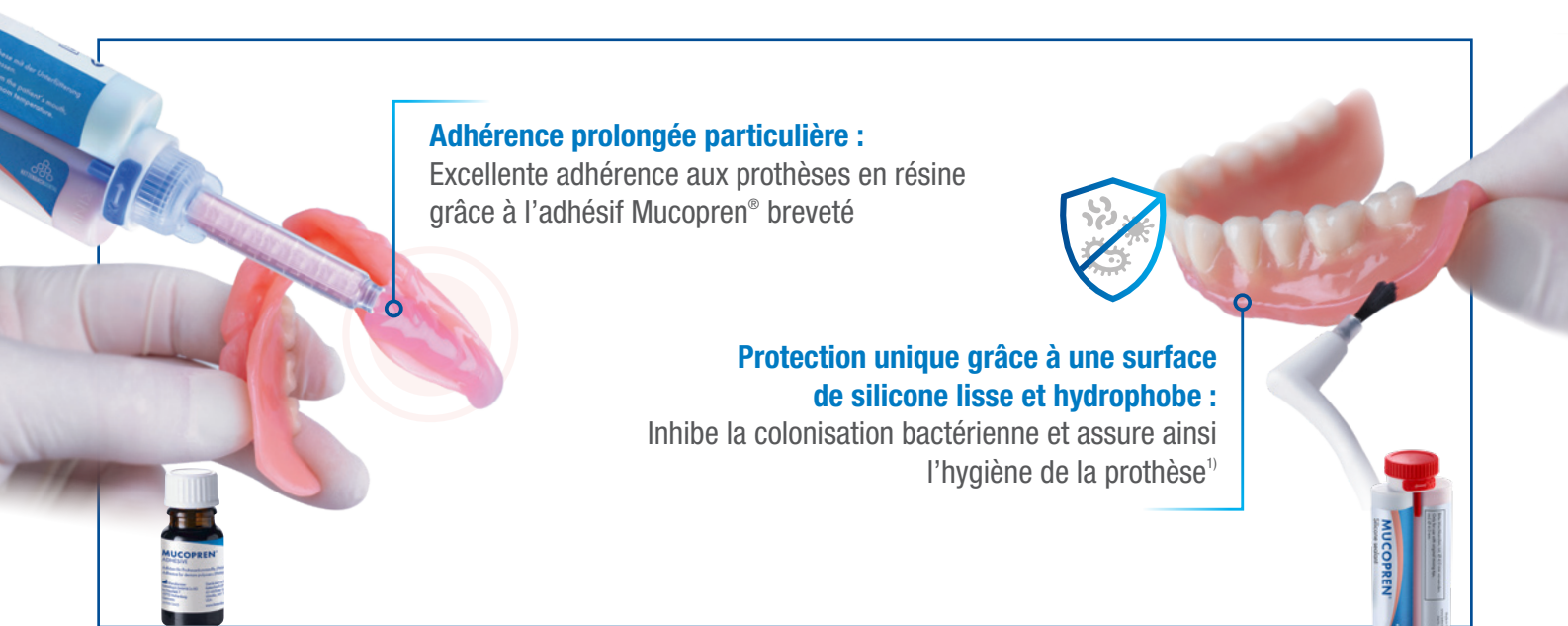

Adhérence prolongée particulière :
Excellente adhérence aux prothèses en résine grâce à l'adhésif Mucopren® breveté

Protection unique grâce à une surface de silicone lisse et hydrophobe :
Inhibe la colonisation bactérienne et assure ainsi l'hygiène de la prothèse¹⁾



Vidéo d'application

Manipulation facile et mise en œuvre rapide

Des temps de prise modernes et des temps de maintien réduits assurent une procédure rapide et irréprochable au cabinet comme au laboratoire.

Stimule le processus de cicatrisation après la pose d'implants

Convient aussi à une ostéo-intégration irréprochable en implantologie.



Grand confort en bouche

Le rebasage souple est totalement inodore et neutre au goût ce qui rend le port de la prothèse aussi agréable que possible.

¹⁾ Résultat d'études in vitro démontrant que la croissance de *Candida albicans* a pu être prévenue par la surface de silicone lisse

TIENT SES PROMESSES



AUTRES INDICATIONS



- Pour la réalisation de **rebasages qui restent souples**
- Pour soulager les zones opératoires après l'insertion **d'implants**
- Pour compenser les régions muqueuses avec différentes résiliences
- Pour soulager les arêtes osseuses tranchantes
- Pour le rebasage des **prothèses provisoires**
- Comme **conditionneur de muqueuse** en cas de stomatite prothétique
- Pour la réalisation et le rebasage d'**obturations**

Avantages d'utilisation du nouvel adhésif

1 X APPLICATION

REQUISE



CÔTÉ PATIENT

3 MIN

Après seulement **3 minutes** de temps de maintien, le façonnage de la prothèse peut se poursuivre.



CÔTÉ LABO





3 MIN

Le temps de maintien est réduit à seulement **3 minutes** en autocuiseur ou au bain-marie.

MUCOPREN® SOFT – LA GAMME



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Set de base	REF 28105	50 ml Mucopren® Soft, 50 ml de vernis de protection, 10 ml d'adhésif, 6 embouts mélangeurs bleus, 16 embouts mélangeurs rouges, 1 porte-pinceau, 20 pinceaux à usage unique, 1 fraise acier, accessoires	 
Mucopren® Soft Pack normal	REF 15687	2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 embouts mélangeurs bleus	
Mucopren® Vernis de protection	REF 15686	50 ml Mucopren® vernis de protection, 8 embouts mélangeurs rouges	
Adhésif Mucopren®	REF 14203	10 ml adhésif Mucopren®	



Caractéristiques techniques

Nom du produit	Rapport de mélange	Durée de préparation à 23 °C ≤	Durée de mise en bouche à 35 °C ≥	Bain-marie	Fin de la prise ≥	Dureté Shore (env.)
Mucopren® Soft – rebasage direct	1:1	2:15 min	3:15 min	Sans objet	05:30 min*	A 28
Mucopren® Soft – rebasage indirect	1:1	2:15 min	Sans objet	3:00 min	> 3 min	A 28
Mucopren® Soft Vernis de protection	1:1	1:30 min	Sans objet	Sans objet	6:30 min à 23 °C	A 33

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr

Utilisation, vente et distribution interdites en Allemagne.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

