

VISALYS® BULK FLOW


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent



**ESTHETIQUE
REMARQUABLE**



NOUVEAU


COMPOSITE FLUIDE ONE-SHADE BULK

VISALYS® BULK FLOW

VISALYS® BULK FLOW est un composite d'obturation nano-hybride fluide et photopolymérisable, conçu pour remplir des cavités jusqu'à 4 mm de profondeur. Il offre une combinaison parfaite d'efficacité, de stabilité et d'esthétique.

ONE-SHADE
SYSTEM

Une adaptation exceptionnelle de la teinte avec une teinte unique grâce au système One-Shade. Un véritable effet caméléon, offrant une fluorescence naturelle pour des restaurations d'une réalisme impressionnant.

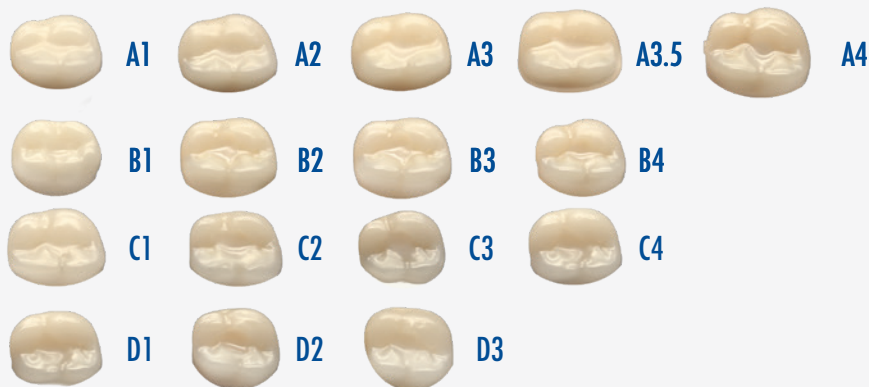

Exemples d'obturations avec VISALYS® BULK FLOW dans les teintes Vita



Une polissabilité exceptionnelle pour une finition brillante et durable.

TÉMOIGNAGES D'UTILISATEUR

VISALYS® BULK FLOW se distingue par une finition agréable, une parfaite adaptation de la teinte et une brillance exceptionnelle.

Dr Maximilian Dobberty

UNE CONSISTANCE CONVAINCANTE

VISALYS® BULK FLOW agit comme un Flow tout en offrant la stabilité et la malléabilité d'un Fill.

Il combine une grande stabilité avec une excellente radio-opacité. Les faibles forces de rétraction assurent une adhérence fiable.

Grâce à la conception ingénieuse de la seringue, il n'y a pas d'écoulement.

De plus, les remplissages sont précis sans perte de matériau, grâce au joint mobile intégré.




LA CONSISTANCE
D'UN
FLOW
AVEC
LA MALLÉABILITÉ
D'UN

FILL





ESTHETIQUE REMARQUABLE

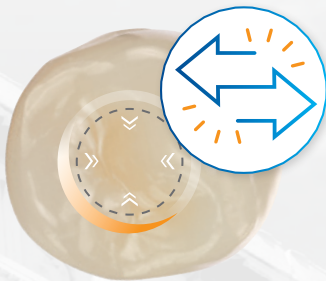

Le **véritable effet caméléon** de notre **système One-Shade** et la **fluorescence naturelle** assurent des restaurations vivantes et fidèles aux dents naturelles.



Aucune décoloration ne transparaît à **partir d'une épaisseur de 3 mm**.




VISALYS® BULK FLOW



OMNICHROMA FLOW BULK

* Exemples de disques de 3 mm dans le matériau d'obturation correspondant, teinte « Universal »

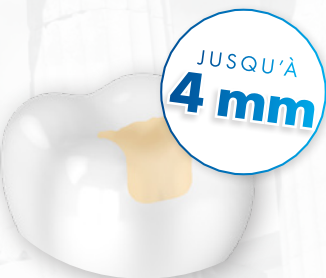

Un travail efficace **sans incréments** ni **couche de couverture supplémentaire**.



**SANS
BIS-GMA**




EXCELLENTE ADAPTATION DE L'ESPACE MARGINAL

L'excellente adaptation du matériau aux parois de la cavité réduit le risque d'interstices marginaux et de décolorations, pour des restaurations durables.


Aperçu de la simulation de mastication avec le simulateur Marburger (TMWB)*.

Qualité marginale
émail

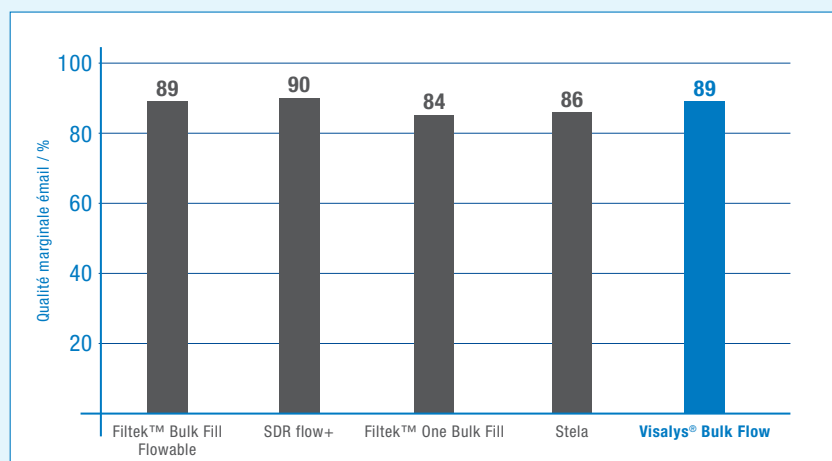


Aperçu de la simulation de mastication avec le simulateur Marburger (TMWB)*.

Qualité marginale
dentine

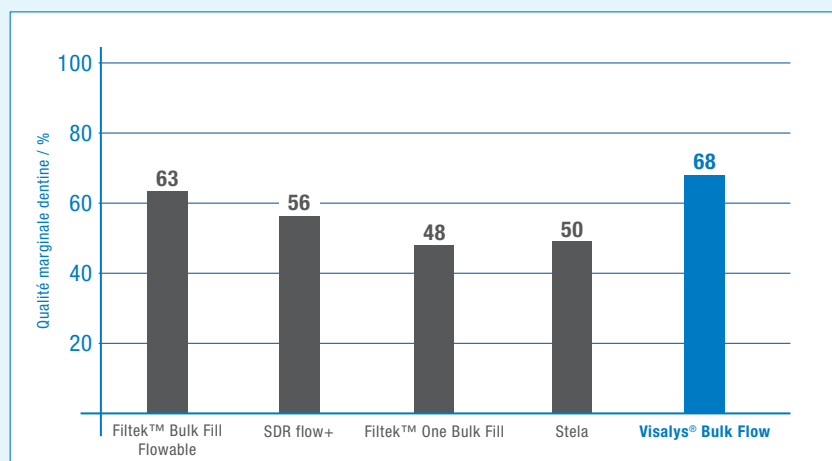

* Mesures du Prof. Roland Frankenberger, Université de Marbourg, 2024.
Contraintes alternées thermo-mécaniques : 1 000 000 de cycles à 50 N, 25 000 cycles thermiques (5/55 °C), 264 dents (n = 8), MOD classe II.

LA GAMME

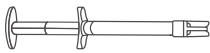VISALYS® BULK FLOW		1 x seringue de 2 g 5 x canules d'application	REF 15064
VISALYS® BULK FLOW		15 x capsules de 0,25 g	REF 15066
VISALYS® CANULES D'APPLICATION		50 pièces, ø 0,9 mm	REF 15022
VISALYS® CANULES D'APPLICATION		50 pièces, ø 1,2 mm	REF 15023



Made in
Germany

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines • France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr




KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent